

Kurzanleitung des Sets von Joysbio

(mit freundlicher Genehmigung des Landesrettungsvereins Weisses Kreuz)



SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold)

Inhalt (Set zu 5 Tests)

- 5 Testkassetten verpackt in Folienbeutel mit Trockenmittel
- 5 Extraktionsröhrchen mit Puffer
- 5 Düsenkappen
- 5 Abstrichtupfer für Probeabstrich
- 1 Qualitätszertifikat
- 1 Gebrauchsanweisung

Testbox hinten dient als Halterung der Extraktionsröhrchen.



Teststreifen



Extraktionsröhrchen mit Puffer



Abstrichtupfer

Vorbereitung

- Das Testkit wird bei 2 - 30 °C im verschlossenen Beutel bis zum Verfallsdatum aufbewahrt und darf nicht eingefroren werden.
- Vor Gebrauch soll das Testset auf Raumtemperatur sein (15 - 30 °C).
- Die Testkassette soll innerhalb einer Stunde nach Herausnehmen aus dem Folienbeutel verwendet werden.
- Das Testkit muss vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Feuchtigkeit geschützt werden.

Durchführung

1. Die Dichtungsfolie des Extraktionsröhrchens wird entfernt und das Röhrchen auf die dafür vorgesehene Halterung (siehe hintere Seite der Testbox) aufgestellt.
2. Die Testkassette wird aus der Folienverpackung herausgenommen und auf die Arbeitsfläche gelegt.
3. Der Abstrichtupfer wird von der Testperson in ein Nasenloch eingeführt.
4. Die Tupferspitze sollte bis zu 2,5 cm tief in das Nasenloch eingeführt werden.
5. Der Abstrichtupfer wird fünfmal im Inneren des Nasenlochs kräftig entlang der Schleimhaut gerollt, um Schleim und Zellen zu sammeln.
6. Derselbe Vorgang wird im anderen Nasenloch mit demselben Tupfer durchgeführt.
7. Danach wird der Tupfer in das Extraktionsröhrchen eingeführt und mindestens 20 Sekunden lang in der Flüssigkeit auf und ab getaucht.
8. Vor der Entfernung aus der Pufferlösung wird der Abstrichtupfer gegen den Boden des Extraktionsröhrchens gehalten und fünfmal gedreht. Achtung, dass der Inhalt nicht austritt!
9. Der Tupfer wird dann im Sondermüll entsorgt.
10. Die Düsenkappe wird auf das Extraktionsröhrchen fest aufgedrückt, die Flüssigkeit geschwenkt, sodass alles gründlich gemischt wird.
11. Drei Tropfen der verarbeiteten Probe werden in die Probenvertiefung auf der vorbereiteten Testkassette getropft.

1.)



Entnehmen Sie eine Probe der oberen Atemwege mit dem Nasentupfer

2.)




Tauchen Sie den Tupfer mindestens 10 Sekunden lang in der Flüssigkeit auf und ab.

3.)



Geben Sie drei Tropfen auf die Testkassette.

4.)

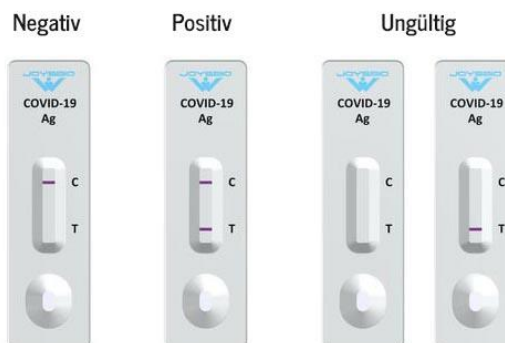

Lesen Sie die Testergebnisse zwischen 15 und 20 Minuten ab.

Testauswertung

Negatives Ergebnis: Nur eine farbige Linie erscheint im Bereich der Kontrolllinie (C). Im Bereich der Testlinie (T) erscheint keine Linie.

Positives Ergebnis: 2 Linien erscheinen, eine Linie im Bereich der Kontrolllinie (C) und eine Linie im Bereich der Testlinie (T).

Ungültiges Ergebnis: Der Kontrollstreifen erscheint nicht. Der Test kann nicht ausgewertet werden und muss wiederholt werden.

Die Testauswertung erfolgt nach 15 - 20 Minuten, jedoch nicht nach 20 Minuten.

Negativ



Positiv



Ungültig

